

Финалом цифровой стоматологии является создание материалов, которые могут полностью заменить естественные зубы.

ODS



Сделано в Корее

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СМОЛЫ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ

ODS
ONE DIGITAL SYSTEM

Обладают самой низкой
в мире вязкостью

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2024



Каталог продукции ред. №1 Апрель 2024г.

ВСТУПЛЕНИЕ

О компании ODS Resins

Стр. 2

О технологиях ODS Resins

Стр. 3

СМОЛА ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ

PERMANENT (A1/A2/A3/A4)

Стр. 4

S&B

Стр. 5

SG (Хирургические шаблоны)

Стр. 6

DENTURE BASE

Стр. 7

CLEAR SPLINT

Стр. 8

IBT (IDBS)

Стр. 9

MODEL

Стр. 10

CAST

Стр. 11

О КОМПАНИИ ODS Resins

Основанная в 2015 году стоматологами, компания **ODS** определила ключевые факторы свойств, необходимых смолам для 3D-печати, учитывая клинические удобства и преодолевая неудобства для специалистов-стоматологов. Поэтому наши исследователи разработали 5 основных технологий, продавая их как **ODS** - смолы.

3D Принтование в клиниках

- Длительное хранение приводит к разделению слоев и их порче
- Большие потери и трудноочищаемость из-за высокой вязкости
- Сложные в обслуживании 3D-принтеры
- Требуется дополнительное время и оборудование, такое как миксер и т.д.
- Расширение и сжатие во время печати и отверждения
- Не поддается автоклавированию
- Вымывание из-за неполного отверждение (трудно подтвердить завершение отверждения)
- Трудно корректируемые результаты
- Неестественный оттенок и прозрачность зубов
- Неприятные запахи и проблемы с кожей

Ключевые факторы для характеристик

- Стабильность материала
- Отсутствие разделения слоев (полное диспергирование)
- Легко очищать 3D-принтеры благодаря низкой вязкости материала
- Не требуется дополнительного оборудования и времени
- Отсутствие деформации
- Автоклавируемый при температуре до 135 °C
- Легко определить состояние отверждения
- Легко корректируемые результаты в клиниках
- Естественная текстура и оттенок зубов
- Отсутствие неприятных запахов и проблем с кожей

5 Основных технологий разработанных ODS

ЭТО МОЛОКО? Низкая вязкость..

5 Основных технологий

1. Низкая вязкость:

- Высокая производительность, удобство, простота обслуживания и отсутствие разделения слоев

2. Устойчивость к высоким температурам:

- Выдерживает высокие температуры до 200°C
- Сохранение стабильности даже в автоклаве при температуре 135°C
- Отсутствие сжатия и расширения

3. Индикатор отверждения:

- Достижение правильного оттенка при полном отверждении (выраженный флуоресцентный цвет при неотверждении)
- Отсутствие перорального воздействия неотвержденных элюентов

4. Замена естественных зубов:

- Прочность на сжатие, твердость и эластичность, как у натуральных зубов

5. Биосовместимость:

- Безвреден благодаря отсутствию неприятных запахов и токсичности (пройдет тест на биологическую стабильность по стандарту ISO 10993)

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ PERMANENT A1/A2/A3/A4 (Постоянные коронки и мосты)

Стоматологический полимерный материал, который может быть использован для создания постоянных протезов, таких как вкладки, накладки, коронки, мостовидные протезы и т.д.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Превосходная точность (низкая вязкость)
- Обеспечение устойчивости к искажениям и расширению
- Исключительная прочность
- Различные оттенки (A1, A2, A3, A4)
- Достижение естественной прочности зубов путем химического сочетания с композитными цементами
- Коронки, вкладки, накладки, виниры и т.д.



Свойства	Значение	Стандарт
Вязкость по Брукфилду при 23°C (до отверждения)	160 ± 10cPs	
Цвет (после отверждения)	A1, A2, A3, A4	
Твердость по Роквеллу	≥HRR115	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	200 МПа	ISO 10477
Модуль изгиба	3,500~4,000 МПа	ISO 10477
Энергия печати	11~15 мДж/см ²	Толщина слоя 100µm
Энергия после отверждения	174,000~243,600 мДж/см ² (5~7 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100µm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 1000 еа для изготовления одной коронки (около 0,8г ~ 1г)	



СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ С&В (Временные коронки и мосты)

Временный полимерный материал, который может быть использован для создания временных протезов, таких как коронки и мостовидные протезы, перед изготовлением постоянных протезов.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Отличные свойства (прочность на изгиб и растяжение)
- Длительность ношения в течение 30 дней и более
- Обеспечение устойчивости к искажениям и расширению
- Превосходная точность (низкая вязкость)



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Яркость эмали натурального зуба	
Твердость по Роквеллу	≥HRR120	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	150 МПа	ISO 10477
Модуль изгиба	2,000 МПа	ISO 10477
Энергия печати	11~15 мJ/cm ²	Толщина слоя 100µm
Энергия после отверждения	174,000~243,600 мJ/cm ² (5~7 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100µm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 1000 еа для изготовления одной коронки (около 0,8г ~ 1г)	



⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ SG (Хирургические шаблоны)

Для указания пути и расположения хирургических инструментов, а также мест проведения операций.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Высокие свойства
- Быстрое время отверждения
- Доступен для имплантации без металлической втулки благодаря своей высокой твердости
- Отсутствие запаха
- Доступен для мониторинга мест хирургического вмешательства благодаря своей высокой прозрачности (становится прозрачным после полного отверждения)
- Точные и разнообразные формы направляющих (круг, шестиугольник и т.д.)
- Стабильность
- Отсутствие риска инфицирования во время операции благодаря автоклавируемости



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Прозрачный	
Твердость по Роквеллу	≥HRR115	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	100 МПа	ISO 20795-1
Модуль изгиба	2,100 МПа	ISO 20795-1
Энергия печати	14~18 мJ/cm ²	Толщина слоя 100μm
Энергия после отверждения	243,600~487,200 мJ/cm ² (7~14 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100μm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 142 еа для изготовления половины дуги (около 6 ~ 7г)	

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ DENTURE BASE (Базисы зубных протезов)

Фотополимерный материал, который можно использовать для создания базиса зубного протеза.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Отличная посадка благодаря своей точности и низкой вязкости
- Обеспечение устойчивости к деформациям, сжатию и расширению
- Того же оттенка, что и настоящая десна
- Исключительная прочность



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Яркость эмали натурального зубы	
Твердость по Роквеллу	≥HRR120	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	150 МПа	ISO 10477
Модуль изгиба	2,000 МПа	ISO 10477
Энергия печати	11~15 мJ/cm ²	Толщина слоя 100µm
Энергия после отверждения	174,000~243,600 мJ/cm ² (5~7 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100µm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	250g
Расчетное количество на 1 кг	Около 1000 еа для изготовления одной коронки (около 0,8г ~ 1г)	ODS



⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ CLEAR SPLINT (Защитные каппы)

Для изготовления индивидуальных защитных капп для защиты челюсти от бруксизма и стискивания во время сна.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Исключительная прозрачность
- Превосходная стабильность формы
- Отсутствие термической деформации (устойчивость у высоким температурам)
- Прочный
- Отличная прочность сцепления между металлом и выпускаемой продукцией



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Прозрачный	
Твердость по Роквеллу	≥HRR105	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	≥85 МПа	ISO 20795-1
Модуль изгиба	1,600 МПа	ISO 20795-1
Энергия печати	14~18 мJ/cm ²	Толщина слоя 100μm
Энергия после отверждения	243,600~487,200 мJ/cm ² (5~7 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100μm
Упаковка	1 кг (250g x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 100 ea на изготовление одной единицы (Толщина 2 мм, около 10г)	



СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ IBT (IDBS)

(Шаблоны крепления ортодонтического брекета)

Для определения направления крепления и расположения ортодонтического брекета.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Высокая гибкость
- Превосходная точность
- Используется в качестве отбеливающей каппы (Сертифицирована KFDA)



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Прозрачный	
Прочность на растяжение	10 ± 5 МПа	ISO 527-2
Относительное удлинение при разрыве	50 ± 10%	ISO 527-2
Энергия печати	14~18 мДж/см ²	Толщина слоя 100μm
Энергия после отверждения	243,600~487,200 мДж/см ² (5~7 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100μm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 2000 еа на изготовление одной джиги (около 0,5г)	



⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ MODEL

(Высокоточная стоматологическая модель)

Для создания изящной стоматологической модели, которая передает детали поверхности зуба.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Исключительная воспроизводимость
- Превосходная точность: отображение 95% и более отсканированных данных (в зависимости от разрешения 3D-принтеров)
- Устойчивость к высоким температурам: Доступна в качестве модели для прозрачного элайнера
- Превосходная стабильность: Возможность стабильной печати выходных данных при низкой интенсивности освещения
- Стабильность достигается только при минимальном времени отверждения (10 сек)
- Отсутствие сжатия и расширения

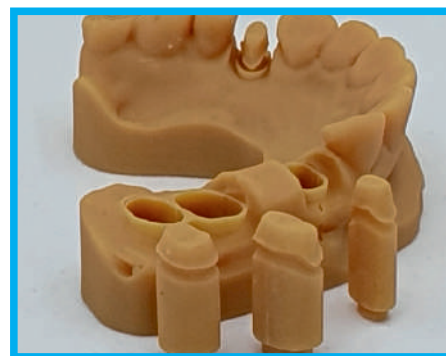

Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Карамель	
Твердость по Роквеллу	≥HRR85	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	≥85 МПа	ISO 178
Энергия печати	12~16 мJ/cm ²	Толщина слоя 100µm
Энергия после отверждения	17,400~34,000 мJ/cm ² (30 сек ~1 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100µm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	<ul style="list-style-type: none"> - Около 60ea на изготовление одной полый модели (около 15 - 16г) - Около 35ea на изготовление одной цельной модели (около 27 - 28г) 	

СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ CAST

(Замена воска для литья металла)

Для замены обычного воска при литье металла.

- Только для стоматологических 3D-принтеров
- Превосходная точность (низкая вязкость)
- Исключительная посадка
- Оптимально для частичного протеза
- Быстрое отверждение и заливка (около 3 часов)
- Легко отливается, после отливки не остается золы



Свойства	Значение	Стандарт
Цвет (после отверждения)	Фисташка	
Твердость по Роквеллу	≥HRR120	ISO 2039-2
Прочность на изгиб	≥100 МПа	ISO 178
Энергия печати	12~16 мJ/cm ²	Толщина слоя 100µm
Энергия после отверждения	17,400~34,000 мJ/cm ² (30 сек ~1 мин в полимеризаторе)	Толщина слоя 100µm
Упаковка	1 кг (250г x4 бутылки)	
Расчетное количество на 1 кг	Около 666 еа для создания частичного протеза (около 1,5г)	



⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию и оттенку.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Horizontal dashed lines for notes, overlaid with a large, semi-transparent image of a bottle of 'PERMANENT 2509 3D printing resin' being poured.

БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ - ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СМОЛ ODS

ODS
ONE DIGITAL SYSTEM



Dental-East

**Стоматологические
оборудование и материалы**

ООО «Дентал-Ист» 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: 8 (800) 222-77-05 (многоканальный), (499) 458-67-37,
(499) 458-73-27, (499) 745-63-16, (499) 745-63-20.
E-mail: sales@dental-east.ru, Сайт: www.dental-east.ru

Ред. №1 Апрель 2024г.



Наш партнёр
интернет-магазин
a3-dent.ru

оборудование и материалы
для стоматологии
A3·DENT.RU

